# AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

## KULLANIM KILAVUZU

### MODEL: RATS-04

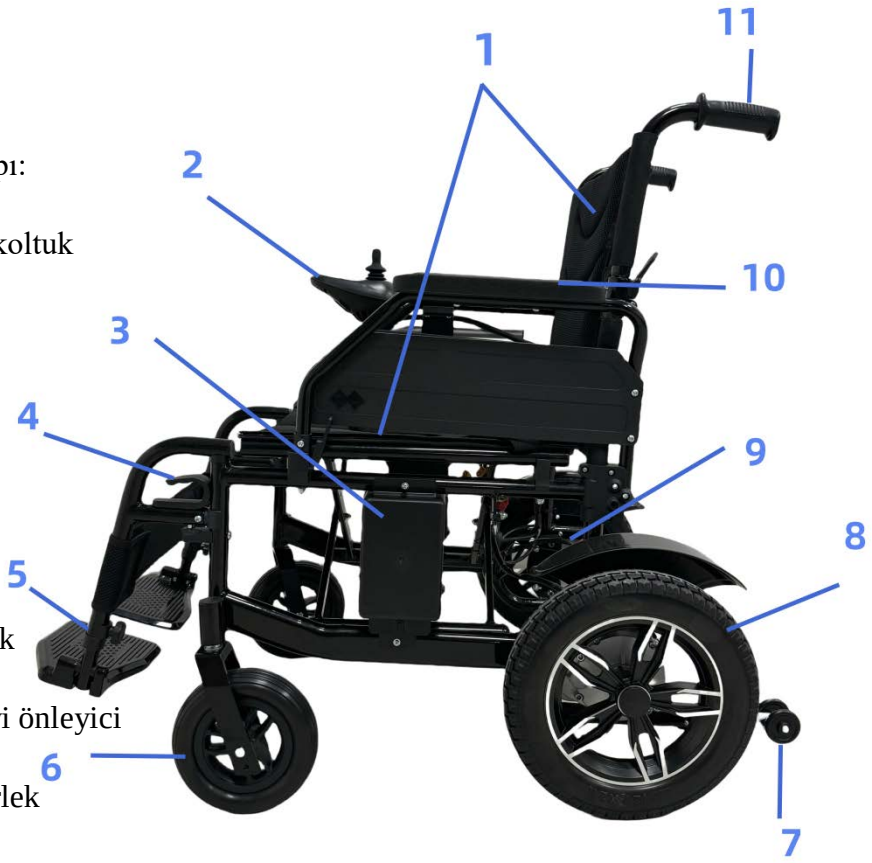
Elektrikli tekerlekli sandalyenizi kullanmaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okuyarak cihazı iyice tanıyın.

Pil ile çalışan tekerlekli sandalyeler, tuvalete rahatça gidemeyen, hastalığı, yaralanması veya engeli olan kişilere kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen bu modellerin taşıma kapasitesi 120 kg'dır



A. Temel yapı:

1. Sırtlık ve koltuk
2. Kontrolör
3. Pil
4. Çerçeve
5. Ayaklık
6. Ön tekerlek
7. Devrilmeyi önleyici
8. Arka tekerlek
9. Motor
10. Kol dayama yeri
11. Tutamaç



B. Teknik Özellikler

Teknik özellikler aşağıdaki gibidir:

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **RATS-04** | **Ağırlık kapasitesi** | **120kg** |
| **Toplam boyut** | **70*40*79cm** | **Korkuluk yüksekliği** | **900mm** |
| **Ön tekerlek** | **8”** | **Koltuk yüksekliği** | **490mm** |
| **Arka tekerlek** | **12”** | **Eğim kabiliyeti** | **≥8°** |
| **Hız** | **≤6 km/s (Ayarlanabilir)** | **Motor** | **2*250W** |
| **Süre** | **12 km** | **Pedal** | **Alüminyum** |
| **Dayanıklılık** | **<12 km (Yol koşullarına bağlı olarak)** | **Şarj süresi** | **8-10 saat** |
| **Sürüş modu** | **Motor** | **Pil kapasitesi** | **2×12 Ah** |
| **Frenleme modu** | **Elektronik** | **Renk** | **Siyah** |

| UZUNLUK (CM) | UZUNLUK (CM) | UZUNLUK (CM) | UZUNLUK (CM) | UZUNLUK (CM) |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 108 | 70 | 91 | 46 | 42 |
| **KOLTUK YÜKSEKLİĞİ (CM)** | **TOPLAM UZUNLUK (CM)** | **KAPASİTE (KG)** | **NET AĞIRLIK (KG)** | **KUTU BOYUTU (CM)** |
|  |  |  |   |  |
| 48 | 40.5 | 120 | 40.5 | 77*38*77cm |

A. Tekerlekli sandalye nasıl kullanılır?

1. Adım). Tekerlekli sandalyeyi kartondan çıkarın ve temiz bir zemine koyun.



Adım 2). Tekerlekli sandalye nasıl açılır?

A, Lütfen ortadaki koltuk minderini kaldırın.

B, Kolun sol ve sağ tarafına basın.



3. Adım) Devrilme önleyiciyi takmak mı istiyorsunuz?

Devrilme önleyici boruyu çerçeveye yerleştirin, ardından boruyu sabitlemek için C cıvatasını deliğe takın.



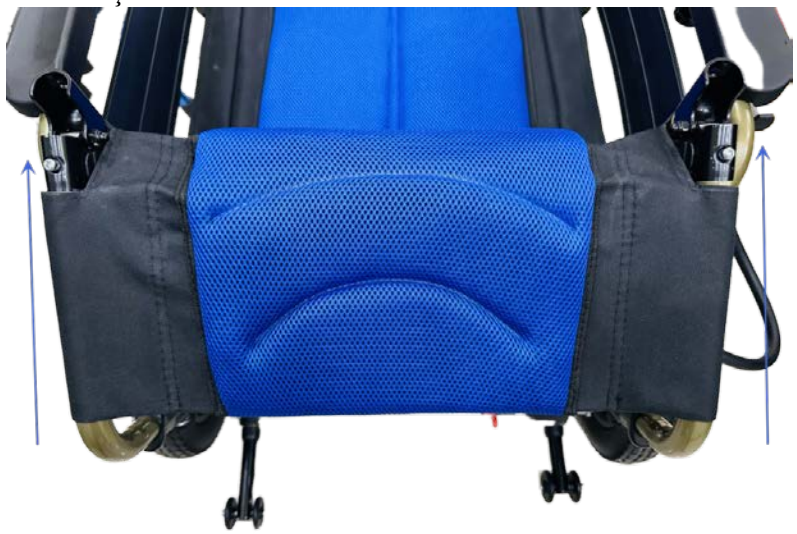

Tüpü yerleştirin.




C cıvatasını takın.

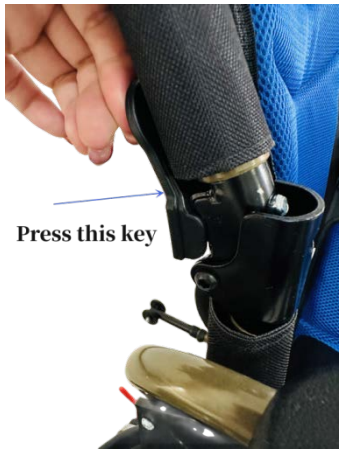
4. Adım) Sırtlık nasıl takılır

Sırtlık kolundaki düğmeye basın; delikteki pim görünüyorsa, montaj tamamlanmıştır.



Sırtlığı katlamanız gerekiyorsa, tuşa basın



Adım 5) Kablolu kontrol ünitesi bağlantı noktasını pil bağlantı noktasına bağlayın.





6. Adım) Şarj etme yöntemi:



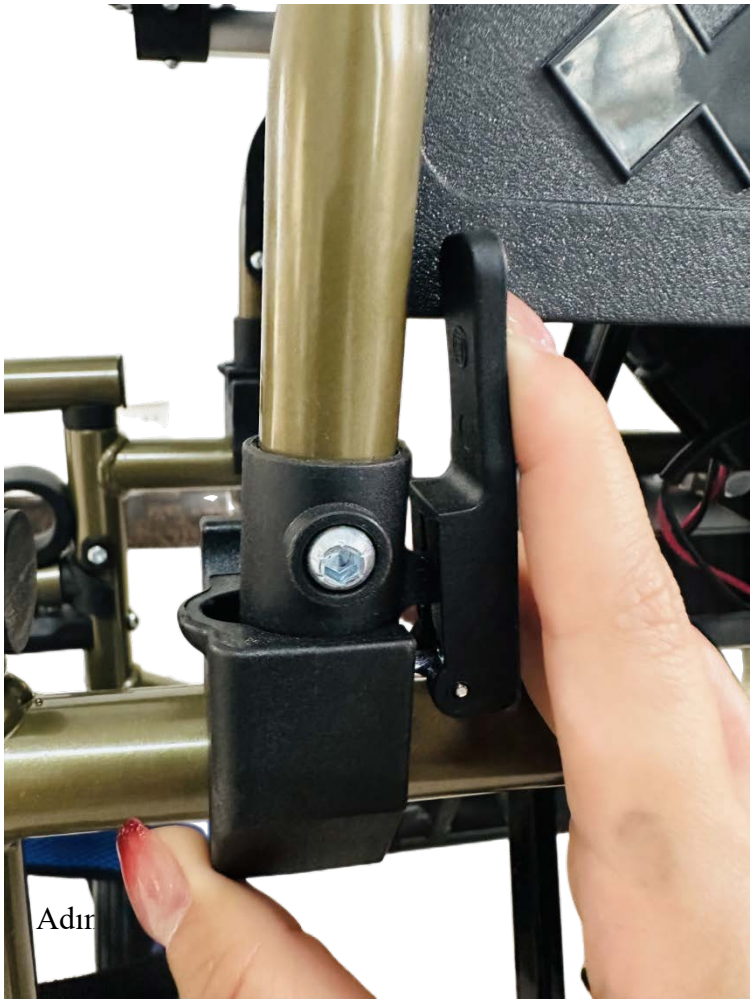

Bağlantı kablosunu takın




Bağlantı

7. Adım) Çıkarılabilir kol dayanağının kullanımı

Düğmeye basıldığında çıkarılabilir, delikteki pim takılı durumdaysa sabit anlamına gelir



Adı

8. Adım) Nasıl fren yapılır?



“KIRMIZI” tuşuna basın, ardından fren yapın.

D. Kullanım talimatları

A Kullanıcı tekerlekli sandalyeye oturduktan sonra düğmeye basarak gücü açar ve güç ışığı yanar. Pil göstergesinin sağındaki ilk çubuk, pilin tam şarjda olduğunu gösterir. Üzerinde sadece bir sarı çubuk varsa, pilin şarjının azaldığı ve şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir. Soldaki üç kırmızı çubuk dışında diğer tüm çubuklar sönmüşse, pilin şarjı bitmiştir ve derhal şarj edilmesi gerekir; aksi takdirde pil zarar görebilir.

B Hız Azaltma düğmesi ve Hız Artırma düğmesi, tekerlekli sandalyenin hızını ayarlamak içindir. Tekerlekli sandalyeyi düşük hızda çalıştırmanız şiddetle tavsiye edilir

C. Kumanda kolu, tekerlekli sandalyenin hızını ve yönünü kontrol etmek içindir. Gitmek istediğiniz yöne doğru kumanda kolunu itin.

D. Uyarı amacıyla korna simgesiyle işaretlenmiş alarm düğmesine basın

E. Kullanım Önlemleri

1) Tekerlekli sandalyeyi araçlara veya uçurumlara çok yakın sürmeyin. İç mekanlarda veya iyi durumdaki yollarda kullanın.
2) Tekerlekli sandalyeyi sık sık merdiven çıkmak için kullanmayın, çünkü bu tekerlekli sandalyenin deformasyonuna yol açabilir.
3) Çok uzun süre dik yokuşlarda çıkmak pilin ömrünü kısaltabilir.
4) Dik yokuşlarda çıkarken tekerlekli sandalyenin devrilmesini önlediği için devrilme önleyici çubuğu asla çıkarmayın.
5) Kumanda kolunu bırakmak tekerlekli sandalyeyi durdurur ve otomatik olarak frenleri devreye sokarak tekerlekli sandalyenin eğimli yerlerde bile durmasına yardımcı olur.
6) Tekerlekli sandalye ile birlikte hava lastikli mini bir pompa verilir. Tekerlek tamamen şişirildiğinde hava valfini sıkın.
7) Bağlantı noktalarının iyi durumda olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

8) Katlamadan önce gücü kapatın ve pil kutusunu çıkarın. Tekerlekli sandalyeyi katlamak için koltuk minderinin ortasını kaldırın.
9) Kontrol ünitesini motorlardan ve pilden ayırın ve kontrol ünitesini çıkarmadan önce vidaları gevşetin.
10) Hava tekerleklerinin tamamen şişirildiğinden emin olun; içindeki hava basıncı yeterli değilse lütfen tekerlekleri şişirerek içindeki hava basıncını 3 kgf/cm² ile 4 kgf/cm² arasında ayarlayın.

Uyarı:

Pil, 380 defaya kadar şarj edilebilir. Güç yetersiz kaldığında lütfen pili şarj edin. Sık kullanım nedeniyle pilin performansı zamanla düşer. Pilin sülfatlanmasına ve hasar görmesine neden olabileceğinden, pili asla tamamen boşalmış halde bırakmayın. Pil uzun süre kullanılmayacaksa, üç veya altı ayda bir şarj edin. Depolama sırasında voltaj 2,06 V'un altına düşerse, pili derhal şarj edin. Pili daima tam şarjlı tutun.

**ECE TIBBİ CİHAZLAR ve MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.**
Adres: Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1
Avcılar/İstanbul/Türkiye
Web: www.ecemedikal.net / www.respirox.com.tr
Tel: 444 78 96

Kurulum ve Kullanım Videosu İçin
For Installation and Usage Video
**Taratınız.**
**Scan it.**

Basım Tarihi: 29.04.2026