Kullanım Talimatları
1. Parmağınızı oksimetrenin kauçuk deliğine sokun.
2. Başlatmak için ön paneldeki düğmeye basın.
3. Oksimetre çalışırken parmağınızı sallamayın veya vücudunuzu hareket ettirmeyin.
4. Ekran yönünü değiştirmek istiyorsanız düğmeye basın.
5. Ekrandan ilgili değeri okuyun.
6. Parmak sinyali alınmazsa cihaz 8 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Oksimetreye parmağınızı takarken tırnak yüzeyiniz yukarı bakmalıdır. Uyarı: Lütfen her testten önce kauçuk kısmı alkolle temizleyin ve test edilen parmağınızı da testten önce ve sonra alkolle temizleyin. (Oksimetrenin içindeki kauçuk, toksik madde içermeyen, zararsız ve ciltte alerji gibi yan etkilere neden olmayan bir kauçuktur.)

Askı ipinin Takılması
1. İpin ince ucunu asma deliğinden geçirin.
2. İpin kalın ucunu, incelmiş olan uç kısmından geçirin ve sıkın.

Ürün Aksesuarları
1 adet askı ipi, Kullanım kılavuzu ve QC kart

Ürün Fonksiyonlarının Detaylı Açıklamaları:
1.Ekran Tipi: TFT Ekran
2.SpO2 Ölçüm Aralığı: %70-%99
Doğruluk: %80-99 aralığındaki aşamada ±%2;
%70-79 aralığındaki aşamada ±%3;
%70'in altında gereksinim yok
Çözünürlük: ±%1
3. PR Ölçüm Aralığı: 30 BPM – 240 BPM
Doğruluk: +1 BPM or %1 (daha büyük olanı)
4.Güç: Dahili 3.7V Lityum İyon Pil
5.Güç tüketimi: 30mA'nın altında
6.Otomatik kapanma: Ürün, 28 saniye boyunca parmağınız ürünle temas etmediğinde otomatik olarak kapanır.
7.Çalışma Ortamı Koşulları
Sıcaklık: +5°C - +40°C
Nem: %15 - %80
Hava Basıncı: 70-106 kpa
8.Taşıma, Saklama Koşulları
Sıcaklık: 10°C - 55°C
Nem: <%95
Hava Basıncı: 50 kPa -106 kPa, aşındırıcı olmayan gaz ve iyi havalandırılmış ortam

Shenzhen Yimi Life Technology Co. Ltd
302, Building C, YouLiTong Technology Industrial Plant, No.56
Qingsong Road, Laokeng Community,
Longtian Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, P.R.C

EC REP **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**
Address: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. AŞ.
Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1
Avcılar/ İstanbul/ TÜRKİYE Tel: 444 78 96
www.ecemedikal.net / www.respirox.com.tr


Basım Tarihi: 2026-01-27

RespiroX

CE 0123

KULLANIM KILAVUZU

PULSE OKSİMETRE

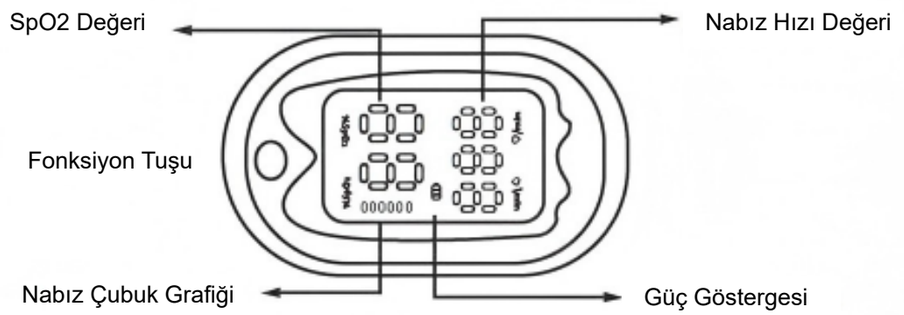

Model: YM102

Özellikler:
1.Pil ömrü göstergesi
2.Sinyal yokluğunda, ürün 8 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
3.Küçük, hafif ve taşıması kolay.
Fonksiyon tuşu açıklaması: Bekleme modunda, tuşa basarak cihazı çalışma durumuna getirin.
4.Çalışma durumundayken bu düğmeye dokunarak ekran modunu değiştirebilirsiniz.
NOT: Makine profil resmi yalnızca referans amaçlıdır, gerçek ürün farklılık gösterebilir.

Pametre Ayarı:
Başlat düğmesine (> 3 saniye) basın, parametre ayarlarına girin. Menü şu şekildedir:
1. Menü 1'de, kısa basış (<1 saniye) ile kullanıcı arayüzü yönünü değiştirin ve uzun basışla kan oksijen ayar moduna girin (>3 saniye).
2. Parmağınızı oksimetrenin test pozisyonuna yerleştirin, oksimetre otomatik olarak ölçüm yapacak ve sonuçları gösterecektir.
Dikkat!
*** Cihazları dış mekanlarda veya güçlü ışık altında kullanırken, düzgün görüntüleme için ekran parlaklığını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.**
*** Pil ömrünü korumak için daha düşük bir parlaklık seviyesi seçmek daha iyidir.**
3. Menü 2'de, "Ses Ayarları"nda "*" işareti göründüğünde, düğmeye (>3s) basarak menü 1'e girin, bir öğe seçmek için düğmeye (<1s) basın ve ardından
Verileri ayarlamak için düğmeye (>3s) basın. Değerleri artırmak veya azaltmak için "+" veya "." işaretini seçin.